



Yes, you can.[®]

> Invacare[®] Bora[™]

Rörelsefrihet!

Kompakt och transportvänlig gör *Invacare[®] Bora[™]* till ett bra sällskap, oavsett vart man vill åka. Tack vare att stolen är uppbyggd av moduler är *Bora[™]* extremt lätt att ta isär och transportera och den är snabb och enkel att serva. Detta, i kombination med hög hastighet och goda köregenskaper, ger den en unik prestanda.

NYHET





➤ **Service och transport**

Med några enkla grepp tar man bort sätet ifrån chassit. Batterierna glider smidigt och lätt ur sitt fäste och endast sladden till manöverboxen måste kopplas ur när man tar isär *Invacare® Bora™*. Transport och lagring/förvaring underlättas tack vare denna enkla och smarta konstruktion.

➤ **Köregenskaper och komfort**

Bora™ har en beprövad fjäderupphängning för stötdämpning för att göra resan utomhus både lockande och bekväm. Den är tillgänglig med två motoralternativ med körhastigheter upp till 6 alternativt 10 km/h.

➤ **Kompakt och manövernöglig**

Bora™ har tagits fram i ett kompakt utförande för att optimera manövrering. Vid val av mindre hjul understiger totalbredden 59 cm vilket ger stora fördelar inomhus.

➤ **Ett utbud av tillbehör - moduler**

Med *Bora™* finns möjligheter att ge stolen en personlig "touch" med exempelvis ett individanpassat sättsystem, olika modeller arm- och benstöd eller med fyra olika ramfärger.



Egenskaper & Tillbehör



Avtagbar sittenhet

Lossa spärren, fäll sitsen framåt och dra ur sladden till manöverboxen för att ta av sätet.



Enkelt fällbart ryggstöd

Lossa ryggstödet och fäll det framåt så låser det automatiskt i det hopfällda läget.



Avtagbara batterier

Separata batterilådor glider lätt och smidigt på en skena i och ur sitt fäste. Fasta anslutningar/kontakter kopplas automatiskt.



Olika tillämpningsområden

Val av två länkhjulsstorlekar beroende av brukarens behov.



Fjädrar för stötdämpning

Även vid höga hastigheter blir åkturen bekväm och framdrivningen säker.



Smal totalbredd

Med tillval av mindre hjul understiger totalbredden 59 cm.



Vridbara tippskydd

En praktisk funktion då chassit ska ställas undan, antingen hemma eller på lagret.

Tillval



Standardsits

Med skumdyna och inställbar ryggdyna samt justerbar rygglädsel för individuell anpassning.



Spectra sits

Polstrad stabil sittdyna.



Flex2 sits

Sits med format ryggstöd för en bekväm och bra hållning. Kompatibel med Rea® sitsen.


Tekniska data

Standard sits	44 - 48 cm ¹	41, 46, 51 cm	46 cm ⁴	48 / 54 cm ⁴	29 - 36 cm ⁴	29 - 47 cm ^{4,5}	0° - 20°
Flex2 sits	39 - 43, 44 - 48, 49 - 53 cm ²	43 - 51 cm	46 cm ⁴	56 cm ⁴	24 - 31 cm, 26 - 34 ⁴	29 - 47 cm ^{4,5}	0° - 20°
Spectra sits	44 - 48, 40 - 44, 34 - 37 cm ³	41, 46, 51 cm	46 cm ⁴	43 / 57 cm ⁴	19 - 32 cm ⁴	20 - 48 cm ^{4,5}	0° - 20°

Standard sits	-2°, 10°, 22°, 34°, 46°	59 / 62 cm ⁶	94 cm	116 cm ⁷	82 / 84 ⁶	98 kg ¹⁰	130 kg
Flex2 sits	0° - 30°	59 / 62 cm ⁶	98 cm	116 cm ⁷	82 / 84 ⁶	94 kg ¹⁰	130 kg
Spectra sits	0° - 30°	59 / 62 cm ⁶	105 cm	116 cm ⁷	82 / 84 ⁶	91 kg ¹⁰	130 kg



50 Ah

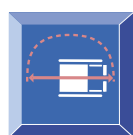

160 cm




6 cm⁸



15,8 %



2 x 230 W

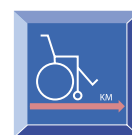

30 km⁹



6 / 10 km/h

- 1 Sittdyna 43 cm
- 2 Sittdynor 38 cm, 43 cm, 48 cm
- 3 Sitsklädsel 43 cm, 39 cm, 33 cm
- 4 Uppmått utan sittdyna / sitsklädsel
- 5 Vissa benstödslängder går endast att få med en viss typ av benstöd
- 6 Beror på storleken på länkhjulen
- 7 Inkl standardbenstöd
- 8 10 cm med kantklättrare
- 9 Enligt ISO 7176
- 10 Totalvikt beroende på konfiguration

Ramfärger



Svart



Transparent Blå



Elektriskt Röd



Silver metallic

Alla mätningar har utförts enligt standardiserade testförhållanden hos Invacare®, om inget annat anges. Invacare® förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.



INVACARE® AB
 Box 66 – 163 91 Spånga
 Kundservice: 08-761 70 90 – Fax 08-761 81 08
 E-mail: sweden@invacare.com · www.invacare.se

